


# MultiVortex

## 多样品涡旋混合器

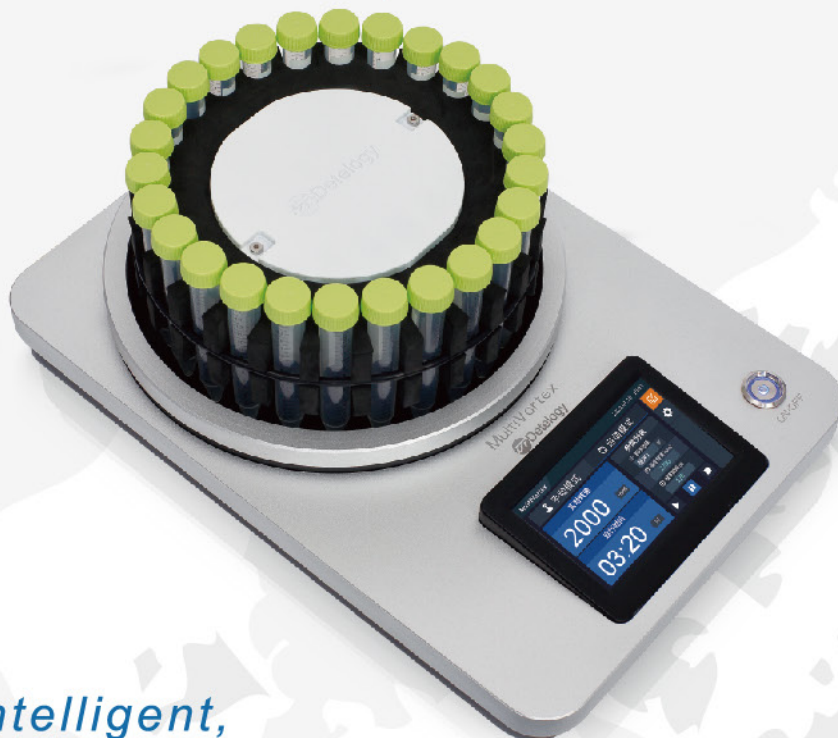

*More Intelligent,  
More Efficient*

## MultiVortex 多样品涡旋混合器

MultiVortex多样品涡旋混合器最多支持26位样品同时进行涡旋混合，为同批样品提供均衡持续的涡旋振荡效果，批量处理能力强，高效省时，确保样品处理平行性良好。

设备采用5寸高清彩色触摸屏控制，智能控制界面上实时显示转速和运行时间，完美搭载手动自动双模式。可储存多种涡旋混合方法，直接调用实现更佳的操作重现性。整机极简设计，小巧灵活，广泛应用于各类分析检测的样品前处理过程。



### 应用领域 APPLICATION FLELD



▶ 食品安全  
添加剂含量、有机高危物  
质等



▶ 农产品检测  
农药残留、兽药残留、  
QuEChERS



▶ 药物分析  
中药材农残、生化分析等



▶ 环境监测  
土壤、水质、沉积物等

### 控制终端

- 采用5寸高清彩色触屏控制，实时显示转速和运行时间
- 支持自动模式或手动模式，中英文界面自由切换
- 预设运行时间结束后自动报警提示，无需人员值守，也可随时启停仪器
- 可储存12种以上的预设方法，直接调用方法，操作重现性更佳




## 性能优势

转速可调范围:200-3000rpm,  
每个方法可设多达6段自动变速

高通量,兼容多种规格的样品管:

- 26位试管支架,适用于 $\varnothing$ 10-16mm样品管
- 12位试管支架,适用于 $\varnothing$ 16-32mm样品管
- 12位试管支架,适用于 $\varnothing$ 37mm样品管

整机极简设计,结构紧凑,灵  
活轻便,节省存放空间

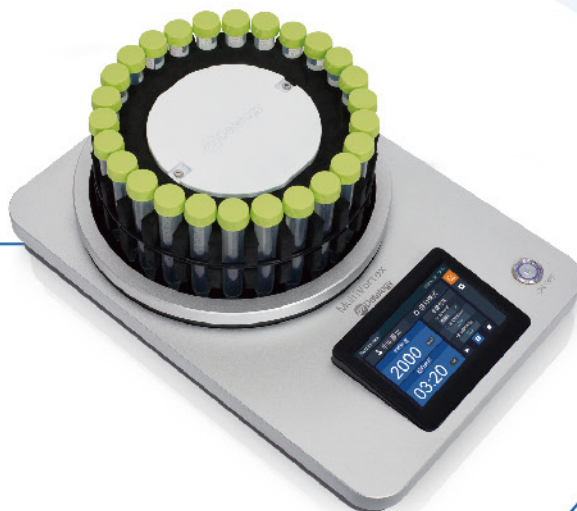

具有过热自动保护功能,可选两种保护  
方式:自适应降速保持不停机或停机后  
自动重启


提供3mm稳定振幅保证样每  
个品混匀充分,涡旋效果卓  
著,运行噪声低

## QuEChERS农残检测样品前处理

### 全自动智能设备组合



**MHS-60多样品均质系统**  
同时快速均质6个样品  
多种刀头和试管规格供选择  
特制可拆洗刀头,避免交叉污染

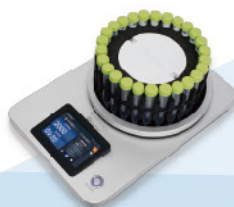

**MultiVortex多样品涡旋混合器**  
转速可调范围:200-3000rpm  
批量处理能力强,无需手持样品操作  
双模式控制,可存多个预设涡旋方法



**FV64UP全自动智能双模式氮吹仪**  
兼容双氮吹模式:涡旋式和自动针追式  
64位超高通量,10.1寸超大控制触屏  
可升级DTLabs小程序远程监控功能

# 用户服务热线

## 400-017-1158

广州得泰仪器科技有限公司

总部地址：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心25号楼705室

邮编：511400

电话：020-34086606

传真：020-34086759

Guangzhou Detelogy Technology Co.,Ltd.

Head Office: Room 705, Building 25, No.555, North Panyu Ave., Guangzhou, Guangdong, 511400.

[www.detelogy.com](http://www.detelogy.com)



微信公众号



每周更新，仪器视频抢先看！

### 主营产品

- 智能氮吹仪
- 全自动智能氮吹仪
- 全自动智能双模式氮吹仪
- 全自动智能平行浓缩仪
- 多样品均质系统
- 多样品涡旋混合器
- 智能快速溶剂萃取仪
- 全自动智能固相萃取仪
- 智能石墨消解仪
- 智能石墨电热板等