


# ASF-01自动加液器

## Auto Solution Feeder

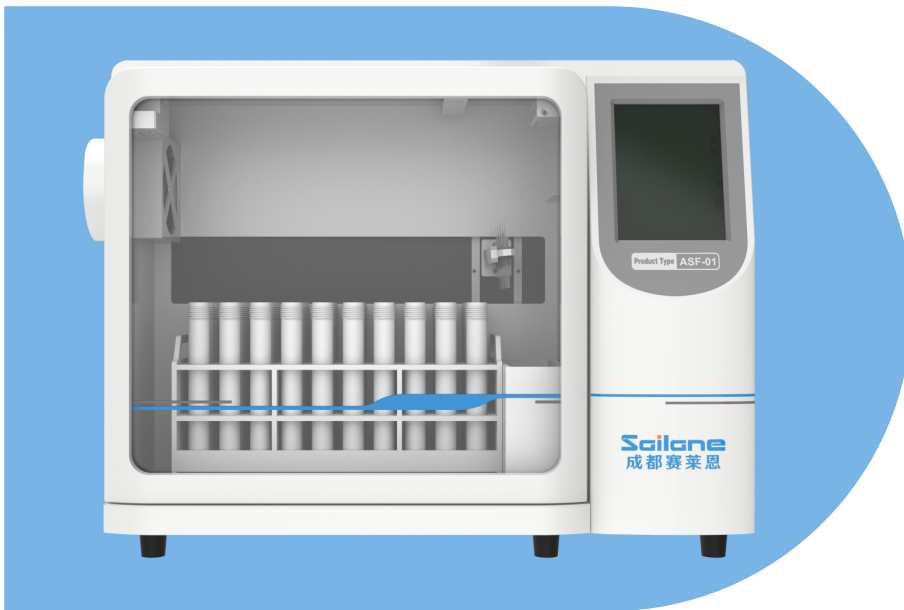

### 产品介绍

ASF-01自动加液器，专为实验室液体加注工作而设计，可用于硝酸、氢氟酸、王水、盐酸、纯水、有机试剂等液体的加注；全防腐设计，尤其适合微波消解罐批量加酸。



四台高精度蠕动泵可同时工作，加液速度快、精度高



各个蠕动泵可独立控制、单独校准，保证长期运行的准确性



所有管线均耐强酸碱及其他腐蚀性液体，可用于硝酸、王水、盐酸、氢氟酸、有机试剂、纯水等液体的移取



密闭式结构设计，保障酸气不外泄，确保操作安全性



自带排风系统，及时将残留酸气、有机气体通过管道排出




具备储液瓶液位实时显示功能



独特的结构设计，保证液体沿内壁加入，防止样品飞溅





整机采用耐腐蚀的ABS材质

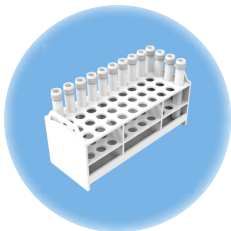

微波消解罐加酸：加40位酸液（每位8mL），180秒内即可完成，不仅大幅节省加酸时间，提高工作效率，密闭性的结构设计，还可避免酸气对人体的伤害。

离心管中有机溶剂的添加

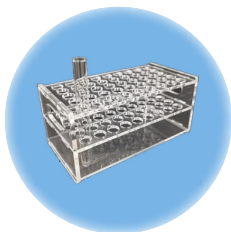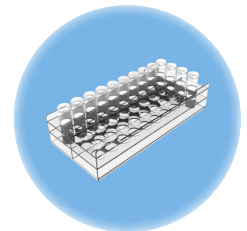

试管架可按要求定制

# ASF-02自动加液器 Auto Solution Feeder

## 产品介绍

ASF-02自动加液器，专为实验室液体加注工作而设计，可用于硝酸、氢氟酸、王水、盐酸、纯水、有机试剂等液体的加注；全防腐设计，尤其适合微波消解罐批量加酸。



四台高精度蠕动泵可同时工作，加液速度快、精度高



各个蠕动泵可独立控制、单独校准，保证长期运行的准确性



所有管线均耐强酸碱及其他腐蚀性液体，可用于硝酸、王水、盐酸、氢氟酸、有机试剂、纯水等液体的移取



具备液体管路监测功能，可监测各种原因造成的加液故障



体积小，可放置于通风橱中




具备储液瓶液位实时显示功能



整机采用耐腐蚀的ABS及亚克力材质



试管架可按要求定制

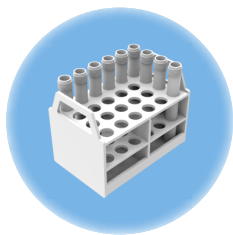

微波消解罐加酸：加24位酸液（每位8mL），120秒内即可完成，大幅节省加酸时间，提高工作效率。

离心管中有机溶剂的添加

