

iQSE-06

智能快速溶剂萃取仪



*More Intelligent,
More Efficient*

广州得泰仪器科技有限公司（Detelogy）成立于2011年，公司总部位于广州南部番禺节能科技园内，毗邻集高教研发、科技服务、创新产业于一体的广州国际创新城，借助番禺粤港澳大湾区地理中心位置的便利优势，短短几年内从专注实验室仪器耗材贸易型企业成功转型为集研发、生产、销售和售后维护服务为一体，致力于为广大实验室客户提供更智能、更高效的智能样品前处理设备实验室优选方案的高新技术企业。

在国家大力发展振兴高新技术产业，国产仪器仪表行业市场明显需求增量及样品检测项目日益增加的前景下，得泰仪器立足于实验室样品前处理环节，关注各个实验室的样品类型、样品特点、样品增量需求，根据操作人员的操作习惯和使用细节，不断开发样品处理能力更强，用时更短，衔接更流畅，使用更便捷的智能实验室样品前处理设备，目前已向市场和用户推出了自动智能氮吹仪、全自动智能平行浓缩仪、智能快速溶剂萃取仪、智能石墨电热板、智能石墨消解仪、多样品均质系统、多样品涡旋混合器等智能样品前处理设备和实验室样品处理流程配套方案。

在追求健康、绿色、环保、可持续发展的大环境下，得泰仪器智能前处理设备涵盖食品安全、药物分析、疾病控制、生命科学、环境监测等应用领域，让更多的实验室能提高样品处理效率，从容应对增加的检测需求，也让更多的实验室用户加入智能实验室体验计划，与我们共建实验室样品前处理解决方案数据库，实现双赢，资源共享！

公司发展至今已拥有各类专利及软件著作权等知识产权50余项，荣获2019年度广州市科技创新小巨人。我们始终致力于发展新的实验室技术，增强用户体验，满足广大客户需求，为全球用户提供更智能更高效的实验室产品和至满意便捷的服务为宗旨，已为全球成千上百客户提供了优质产品及全方位客户服务，在国内外赢得了一定的市场及良好的声誉和口碑。

企业愿景：努力发展新的实验室技术，增强用户体验，以满足广大客户的需求。为全球用户提供更智能更高效的实验室产品和至满意便捷的服务！

企业价值观：千锤百炼，努力为用户创造价值；精诚协作，让创造者更体现价值！

品牌核心价值：更智能，更高效！（More Intelligent , More Efficient）。

服务理念：客户的满意，我们的动力！

质量方针：得泰出品，必属精品！



iQSE-06

智能快速溶剂萃取仪

相比于索氏提取、超声提取等常见样品提取方式，iQSE-06智能快速溶剂萃取仪利用高温高压条件，同时对6个固体或半固体样品进行快速萃取，确保萃取操作的平行性良好，极大程度上减少提取用时和溶剂耗量。iQSE-06采用10.1寸高清彩色触屏控制，图形化界面直观显示，实时显示温度和压力监控曲线，多种不同规格的萃取罐和收集瓶可供搭配使用。同时具备远程监控和萃取完成自动推送通知信息功能，令萃取过程更智能更高效。

应用领域 APPLICATION FLELD



▶ 环境监测
土壤、沉积物、固废等




▶ 食品安全
粮谷、油料、茶叶等



▶ 制药领域
中药材成分、天然产物提取



▶ 化工制品
聚合物、石油化工等

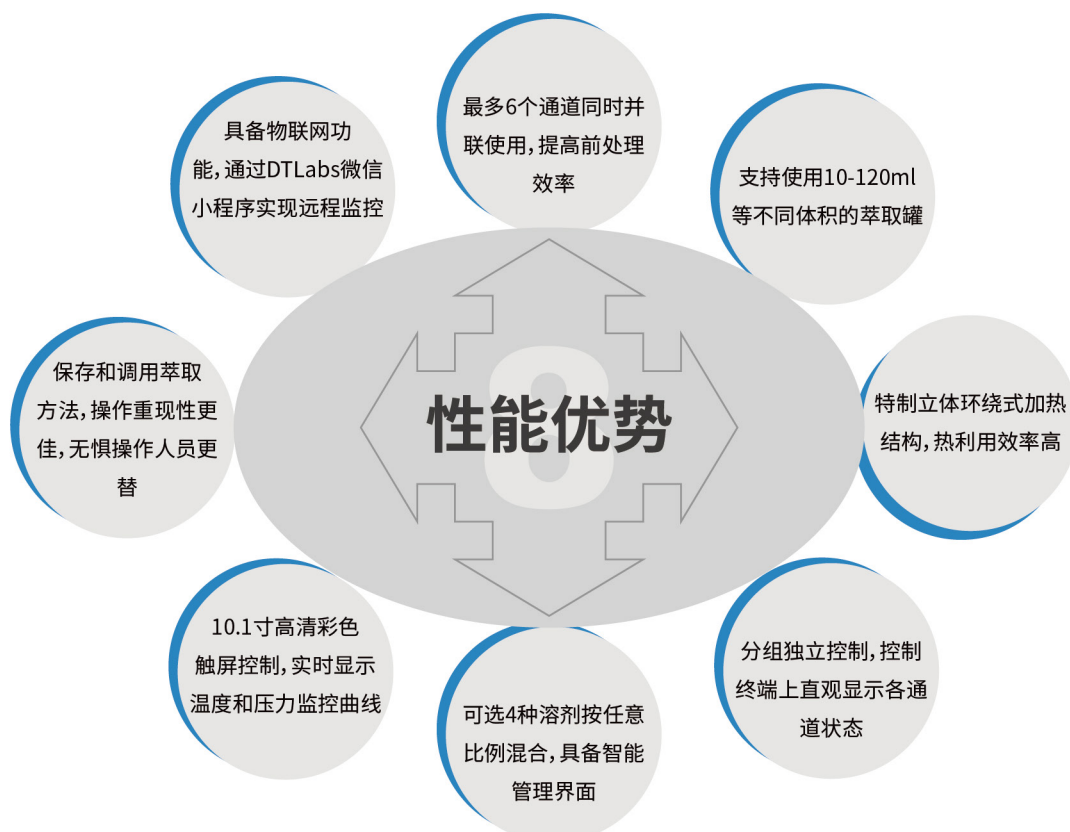



1
高通量：支持6个通道同时并联使用，进阶提高单日处理效率

2
兼容10-120ml的萃取罐装填样品，以应对不同样品的实验需求

3
可选4种萃取溶剂，可按任意比例混合，具备智能溶剂管理界面

4
多种通用收集瓶规格供选择，无需转移样品，与全自动智能浓缩设备无缝链接

5
立体环绕式加热设计，导热效率高，样品受热均匀，加热范围：室温-200℃

6
支持分组通道独立控制，萃取流程界面上直观显示各通道阀门状态

7
透明可视化设计，便于使用人员随时观察样品萃取情况，直观清晰

8
具备防超温、防超压、防泄漏等多重安全防护，具备强力排风装置


10
随时查询使用日志（萃取流程、泄漏性测试、系统清洗），可选导出详细运行记录

9
通过10.1寸高清彩色触屏控制，开始萃取后温度和压力曲线实时显示



控制软件

- 采用10.1寸高清彩色触屏控制，图形化界面直观显示，赋予最佳人机交互体验
- 全方位监控萃取流程，实时显示各项参数和运行曲线图，支持分组通道独立控制
- 可编辑和保存萃取方法，一键调用萃取方法，操作重现性更佳，可导出详细报告图表
- 中英文界面自由切换，具备DTLabs微信小程序远程监控功能，完成时自动推送通知信息

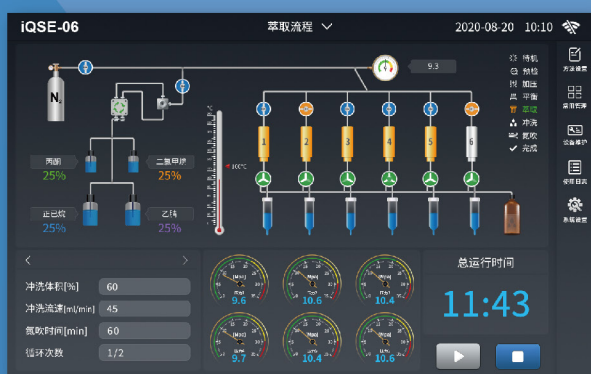

FlexiVap-12/24 全自动智能平行浓缩仪

可与iQSE-06配套使用,减少样品转移次数,避免样品损失,更便捷更高效

同时处理12位或24位样品

氮吹针角度和氮吹压力自动程序调整

可自动定容到1ml或0.5ml

10.1寸高清触屏提供最佳人机交互体验,DTLabs小程序远程监控

独立红外光纤液位传感器自动定量浓缩,每个通道支持单独控制



部分参考标准

- | | |
|-----------------|--|
| HJ 782-2016 | 固体废物 有机物的提取 加压流体萃取法 |
| HJ 891-2017 | 固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 |
| HJ 892-2017 | 固体废物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法 |
| HJ 912-2017 | 固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 |
| HJ 951-2018 | 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |
| HJ 963-2018 | 固体废物 有机磷类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 |
| HJ 783-2016 | 土壤和沉积物 有机物的提取 加压溶剂萃取法 |
| HJ 805-2016 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 |
| HJ 834-2017 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |
| HJ 890-2017 | 土壤和沉积物 多氯联苯混合物的测定 气相色谱法 |
| HJ 921-2017 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法 |
| HJ 1023-2019 | 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法 |
| GB 22996-2008 | 人参中多种人参皂甙含量的测定 液相色谱-紫外检测法 |
| GB 23200.9-2016 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 |

.....

用户服务热线

400-017-1158

广州得泰仪器科技有限公司

总部地址：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心25号楼705室

邮编：511400

电话：020-34086606

传真：020-34086759

Guangzhou Detelogy Technology Co.,Ltd.

Head Office: Room 705, Building 25, No.555, North Panyu Ave., Guangzhou, Guangdong, 511400.

www.detelogy.com



微信公众号



每周更新，仪器视频抢先看！

主营产品

- 智能氮吹仪
- 全自动智能氮吹仪
- 全自动智能双模式氮吹仪
- 全自动智能平行浓缩仪
- 多样品均质系统
- 多样品涡旋混合器
- 智能快速溶剂萃取仪
- 全自动智能固相萃取仪
- 智能石墨消解仪
- 智能石墨电热板等