

智能试剂安全管理系统

Intelligent Reagent Safety Management System

JPG-2000型



公司简介

北京晶品赛思科技有限公司成立于2014年，是一家具有“国家高新”、“中关村高新”认证的双高新技术企业，是一家具有“软件产品”、“软件企业”的双软认证企业，是致力于试剂存储领域，专业从事智能试剂安全管理全套方案的研发、生产、销售及服务，是一家充满活力、具有拼搏向上精神的新兴科技企业。公司总部设立在北京市中关村科技园区，并在江西省南昌市经济技术开发区成立了第二个生产基地。设有北京、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、四川、陕西、广西、江西、内蒙古、宁夏、新疆、云南、河南、大连等办事处及国际业务部。

公司秉承“晶于科技，品行天下”的理念，以“晶品源于专业，专业决定精品”为宗旨，积极拓展技术发展道路，与科研院所合作，开发高精尖的技术产品；一切以用户需求为中心，通过专业技术和不懈努力，提供高质量、高精度的试剂安全管理设备和相关辅助系统，服务于各行各业的实验室试剂管理工作。

2014年获得ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书；

2015年被中国化工仪器网评选为“重质量、守信誉双保障优质企业”；

2016年成为“中国质量检验协会检验检测设备分会”会员单位；

2016年底被认定为“中关村高新技术企业”；

2017年成功注册商标7项，专利5项；

2018年公司建立了现代化的生产车间；

2018年授牌“中关村健源食品微生物技术产业创新战略联盟”监事长单位；

2019年荣获中国高新技术企业认证，CE认证，软件企业认证，软件产品认证，专利4项；

2019年与中国农业大学等单位共同承担2022年北京冬奥会“浸渍冷冻智能化装备”项目；

2020年公司被评定为“AAA级信用单位”等七项信誉等级证书；

2020年公司成立江西晶品赛思智能设备有限公司；

2021年公司荣获“2020年度防疫保障先进企业”和“2020年环境生产先进企业”称号；

2021年公司获得中国绿色实验室“优秀贡献奖”。



国家高新技术企业证书




中关村高新技术企业证书



中国质量检测协会会员单位



AAA企业信用等级证书

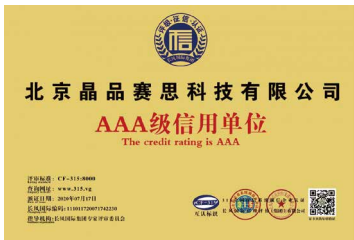

中国绿色环保产品证书



产品专利证书



产品CE证书



双软证书



体系认证证书



产品概述

适用范围

政府、检测机构、学校、企事业单位等各类型实验室；医院试剂科；有易燃、易爆、易制毒等试剂存储需要的单位。

晶品JPG-2000型智能试剂安全管理柜，是一款主打高性价比的试剂柜产品。以低价格、高品质、大空间并带有智能化为特点，必将给传统试剂柜产业带来一次革命性的更新换代潮。

JPG-2000型试剂柜柜体上方嵌有7寸电容触摸屏，装有嵌入式系统。该系统可显示柜内空气质量、温湿度状况、柜门未关闭报警、过滤器耗材更换提醒等功能。柜体内部具有空气过滤模块，通过专用的过滤器来净化对实验人员有害的气体。柜门嵌入RFID刷卡模块，能有效管控双人双锁刷卡流程。如果想实现多台管理可以单独购买外接控制软件，该软件可以装载到用户的电脑里，通过电脑与多台柜体连接进行试剂的出入柜管理及数据导入导出工作，可将操作人员、试剂信息、柜体信息系统的管理起来，形成完整的试剂信息管理系统，可实现对试剂的安全管理。



检测报告



防爆检测报告



防火检测报告



防静电检测报告



有害气体过滤检测报告

JPG-2000型智能试剂柜三大优势

优势一：超高性价比

市场上的智能化试剂柜往往价格都很高，若您既想拥有智能化管控又想拥有大容量的试剂存储空间，同时又具有超高性价比，智能试剂安全管理柜JPG-2000型是您最合适的选择，该管理柜在具有控制软件的情况下可实现多柜并联，极大的提高了在智能管控下的试剂存储空间。其超低的价格，众多的功能将给您带来更多的惊喜。

优势二：全模具化生产

智能试剂管理柜JPG-2000型内部采用防腐蚀全模具化生产工艺，有效降低了客户采购成本，极大提高了产品一致性及制造精度，使产品结构标准化，产品互换性得到有效的保障。柜内层板高度具有灵活调节性，可存储不同规格标准的试剂瓶，如按照每层间隔10cm，最高存储层数累计可达26层，并可随意实现20cm、30cm、40cm……等等各种层高的调节。



优势三：可外接控制软件—具有双模式操作功能

JPG-2000型试剂柜既可以单独使用也可以通过外接控制软件进行管理，具有双模式操作功能。为解决试剂柜单独使用时不能信息化管理的客户痛点，公司自主研发了“试剂柜控制软件V2.0”，用户可根据使用情况后期增加软件。该软件可以安装到实验室电脑主机系统中，具备权限分级管理、异常情况识别、温湿度监控、数据安全备份等功能；同时支持库存查询、试剂效期提醒、最低库存预警设置，还可以与JPG-2000型试剂柜嵌入式系统连接，形成完整的试剂领用信息数据库，轻松实现试剂管理信息化。



JPG-2000可视型



JPG-2000半透型

可视型

技术指标参数	
外形尺寸: 1055*660*1995mm	容量: 920L
显示屏: 7寸电容触摸屏	层板承量: $\geq 85\text{kg/m}^2$
层板及侧板: 防腐材质	UPS电源: 可选
门面板: 无色透明	摄像系统: 可选
温度检测精度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$	湿度检测精度: $\pm 3\%\text{RH}$ (25°C)
过滤器尺寸: 400*370*80mm	风机使用寿命: ≥ 50000 小时
吸附能力: $\geq 20\text{Kg}$	功率: $\leq 100\text{W}$
空气循环次数: 3次/min	

半透型

技术指标参数	
外形尺寸: 1055*660*1995mm	容量: 920L
显示屏: 7寸电容触摸屏	层板承量: $\geq 85\text{kg/m}^2$
层板及侧板: 防腐材质	UPS电源: 可选
门面板: 棕色半透明	摄像系统: 可选
温度检测精度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$	湿度检测精度: $\pm 3\%\text{RH}$ (25°C)
过滤器尺寸: 400*370*80mm	风机使用寿命: ≥ 50000 小时
吸附能力: $\geq 20\text{Kg}$	功率: $\leq 100\text{W}$
空气循环次数: 3次/min	

产品分类

<p>① 可视型</p> <p>无色透明门板，可以快速查看柜内存储的试剂情况，适合存放常规保存的试剂。</p>	<p>② 半透型</p> <p>棕色半透明的门板，适合存放一些对光敏感程度一般的试剂。</p>
<p>③ 遮光型</p> <p>纯黑不透明柜门，适合存放常规及需要避光保存的试剂。</p>	<p>④ 全钢型</p> <p>全钢不透明柜门，适合存放常规及避光保存、防爆要求的试剂。</p>

* 除以上型号，用户可定制各类分窗型、加强型。

*以上参数仅供参考，以实际发货参数为准。



JPG-2000遮光型

遮光型

技术指标参数

外形尺寸: 1055*660*1995mm	容量: 920L
显示屏: 7寸电容触摸屏	层板承量: $\geq 85\text{kg/m}^2$
层板及侧板: 防腐材质	UPS电源: 可选
门面板: 黑色不透明	摄像系统: 可选
温度检测精度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$	湿度检测精度: $\pm 3\%\text{RH}$ (25°C)
过滤器尺寸: 400*370*80mm	风机使用寿命: ≥ 50000 小时
吸附能力: $\geq 20\text{Kg}$	功率: $\leq 100\text{W}$
空气循环次数: 3次/min	



JPG-2000全钢型

全钢型

技术指标参数

外形尺寸: 1055*660*1995mm	容量: 920L
显示屏: 7寸电容触摸屏	层板承量: $\geq 85\text{kg/m}^2$
层板及侧板: 防腐材质	UPS电源: 可选
门面板: 全钢不透明	摄像系统: 可选
温度检测精度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$	湿度检测精度: $\pm 3\%\text{RH}$ (25°C)
过滤器尺寸: 400*370*80mm	风机使用寿命: ≥ 50000 小时
吸附能力: $\geq 20\text{Kg}$	功率: $\leq 100\text{W}$
空气循环次数: 3次/min	

JPG-2000型可选件

① 摄像系统	② UPS电源	③ 试剂柜控制软件
④ 层板	⑤ 智能层板	⑥ 多规格小瓶支架
⑦ 手机APP软件		

* 用户可根据使用需求选购以上可选件。

*以上参数仅供参考，以实际发货参数为准。

① 智能、安全

① 嵌入式系统

嵌入式系统“试剂柜管理系统V2.0”，液晶显示，触摸屏操作，可监测柜内温湿度，空气质量等信息。




② 外接控制软件

双模式-可外接控制软件“试剂柜控制软件V2.0”，实现多柜连接管控，试剂出入库管理，查询试剂信息。




③ 智能定位层板

产品需连接外接软件，通过射频技术精准定位到每层、每个孔位，主动识别试剂信息，无需扫码操作，多种孔位可选。

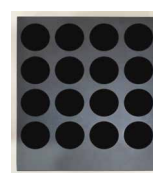

④ 多柜并联、系统交互

嵌入式系统和控制软件可以通过WIFI功能进行远程交互、多柜并联，存储空间无限扩大，试剂信息统计更为便利、准确，导出、打印各式样报表，数据海量存储，永久保存。

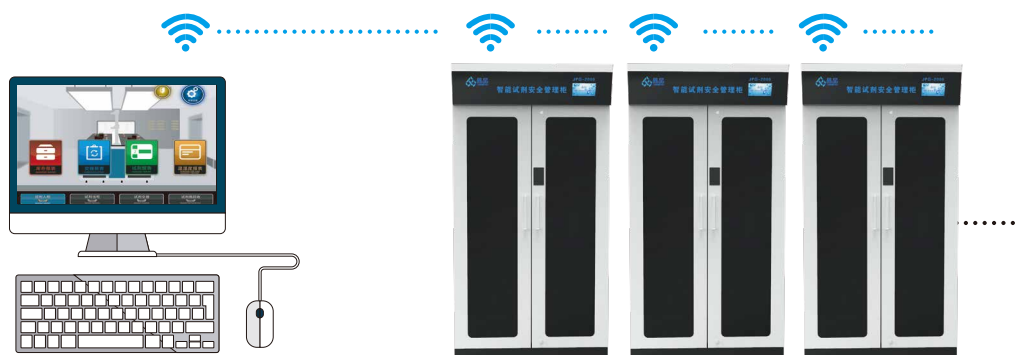

⑤ 空气过滤系统

内置活性炭空气过滤系统，有效解决化学品气味影响实验员身体健康的问题。可更换的过滤材料，大风量风扇、保证内部空气每分钟循环三次。

⑥ 双人双锁

有效解决试剂的安全管理，符合《公安部第154号令》对于易制毒、易制爆危险化学品的管理要求。对于常规试剂也可方便的实现单人单锁控制。

② 经济、方便

① 超大的存储容量

JPG-2000试剂柜的单柜存储容量达到了920L，并可多柜并联。



② 可调节层板

灵活存储，层高调节极为方便，每层可根据需求放置不同规格的试剂瓶。



③ RFID刷卡模块

通过刷卡及输入密码可方便的开关柜门，IC卡片具有多种样式供用户选择，在断电的情况下具有柜门自动锁止功能，可通过钥匙手动开关柜门。

④ 全模具化设计

模具化设计降低了客户采购成本，并提高了产品一致性及制造精度，使工件的质量有所改善和提高，加强了标准结构互换性，现场组装方便快捷。

③ 灵活、扩展

① 智能摄像系统

无人值守，可实现24小时全天候视频监控，360°无死角，硬盘存储可达30天，并可无限扩充。



② UPS电源

具有断电续航能力，符合公安部《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》，并可根据用户需求定制。




客户案例展示:



沈阳市客户



重庆市客户

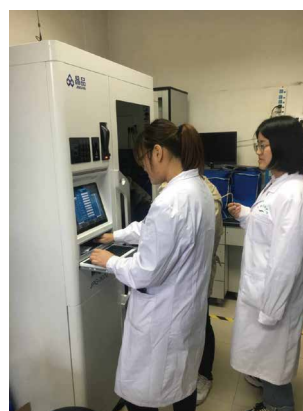

西安市客户



上海市客户



天津市客户



济南市客户



赤峰市客户



营口市客户



镇江市客户



宜宾市客户



鞍山市客户



昆明市客户

*以上图片均由晶品赛思原创拍摄,未经同意,严禁转载。



北京晶品赛思科技有限公司

Beijing Jingpin Science&Technology Co., Ltd.

北京办事处

地址: 北京市平谷区平和街39号院
销售热线: 18515926939

大连办事处

地址: 辽宁省大连市开发区
销售热线: 13795159208

山西办事处

地址: 山西省太原市小店区
销售热线: 18535182853

陕西办事处

地址: 陕西省咸阳市秦都区
销售热线: 13201927828

黑龙江办事处

地址: 黑龙江省大庆市龙凤区
销售热线: 13069663551

江西办事处

地址: 江西省南昌市南昌县
销售热线: 19168291539

广西办事处

地址: 广西省南宁市江南区
销售热线: 18801257883

宁夏办事处

地址: 宁夏银川市金凤区
销售热线: 18209507680

辽宁办事处

地址: 辽宁省沈阳市于洪区
销售热线: 18604025106

甘肃办事处

地址: 甘肃省兰州市安宁区
销售热线: 15609318381

云南办事处

地址: 云南省昆明市呈贡区
销售热线: 13211658595

吉林办事处

地址: 吉林省长春市二道区
销售热线: 18604318387

福建办事处

地址: 福建省福州市仓山区
销售热线: 15606018931

四川办事处

地址: 四川省成都市锦江区
销售热线: 18602865579

内蒙古办事处

地址: 内蒙古赤峰市红山区
销售热线: 15047619099

新疆办事处

地址: 新疆维吾尔自治区
销售热线: 18599752024

河南办事处


地址: 河南省郑州市管城回族区
销售热线: 18695903531

北京总部

地址: 北京市平谷区中关村科技园区
平谷园平和街39号院21楼
邮编: 101200
电话: 010-89959858
传真: 010-69979858
邮箱: jppoffice@bjjpss.com
网址: www.bjjpss.com
全国客户服务热线: 400-6066-139
全国销售热线: 18311236681



晶 品 源 于 专 业
专 业 决 定 精 品

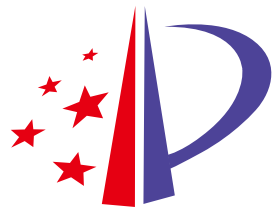

北京晶品赛思科技有限公司
Beijing Jingpin Science & Technology Co.Ltd.
网站: www.bjjpss.com
电话: 010-89959858
邮箱: jpoffice@bjjpss.com